

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ ADM MODULAR BRACE SYSTEM™

0 - 16 YAŞLARINDAKİ ÇARPIK AYAK HASTALARI İÇİN



ADM MODULAR BRACE SYSTEM

c-prodirect

Telif Hakkı (c) C-Pro Direct. 2021. Tüm Hakları Saklıdır.

243_MKT_v004

C-Pro Direct, çarpık ayak ortez tasarımı alanındaki bilgi ve deneyimlerini modern materyaller ve üretim teknolojileriyle bir araya getirmiştir. Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde ayakkabı üretiminde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Günümüzde, çarpık ayak hastaları, klinisyenler ve bakıcılardan oluşan topluluk daha konforlu, cazip ve esnek ortez çözümlerinden yararlanabilmektedir. Çarpık ayak hastalarına yönelik ADM Modular Bracing System™ çözümünün, uzun yıllardır çarpık ayak ortez uygulamaları alanındaki en önemli ilerleme olduğu kanısındayız.

Denis Browne ve Dobbs tipi Ayak Abdüksiyon Ortezleri, ortez uygulamalarında yerleşik tedavi standardıdır ve Ponseti Yöntemine uygun şekilde iyi seviyede düzeltilmiş çarpık ayakları olan çoğu hasta için önerilir. Öte yandan, hareketli arabalar, tek taraflı ortezler ve kişiye özel AFO'lar gibi diğer ortez tiplerinin gerekli olduğu daha komplike gereksinimleri olan önemli sayıda hasta da mevcuttur. Her çarpık ayak hastası için uygun tek bir çarpık ayak ortez tipi yoktur. Bir hastaya reçete edilen ortez sisteminin de zaman içinde değişmesi veya evrilmesi gerekebilir. Ayrıca, çarpık ayak tedavisi her zaman 5 yaşında sona ermez. Bazı hastalar için ortez uygulamasının ergenlik yıllarına ve yetişkinliğe kadar sürmesi gerekebilmektedir.

Çarpık ayak hastalarına yönelik **ADM Modular Bracing System™**, C-Pro Direct ile lider bir büyük ölçekli ayakkabı üreticisinin arasındaki işbirliğinin bir sonucudur. ADM Modular Bracing System, günümüzde ulaşılabilen en geniş tedavi yöntemi yelpazesi ve en geniş hasta yaş aralığı için teknolojik açıdan en gelişmiş ve esnek ortez sistemini sağlar.

ADM Modular Bracing System, günümüzde ulaşılabilen en geniş tedavi yöntemi yelpazesi ve en geniş hasta yaş aralığı için teknolojik açıdan en gelişmiş ve esnek ortez sistemini sağlar.

ADM Modular Bracing System™

Çarpık ayak hastalarına yönelik ADM Modular Bracing System™, ilk kez ortez gereksinimleri her ne olursa olsun tüm çarpık ayak hastaları için tek bir tutarlı değiştirilebilir ortez sistemi sunar.

Sistem, 0 ila 16 yaşlarındaki idiopatik, kompleks ve sendromik çarpık ayak hastalarını destekler ve klinisyenlere herhangi bir yerde mevcut ortez seçeneklerinden oluşan en geniş kapsamlı seti sunar. ADM Modular Bracing System™ temel bileşenleri şunlardır:

- ADM Çarpık Ayak Bilek-Ayak Ortezi
- ADM Harici Rotasyon Çubuğu
- Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması (gece AFO veya ambulator ayakkabı dâhil)
- ADM Ambulator Ayakkabı



ADM Modular Bracing System™, en geniş çarpık ayak hastası gereksinim ve yaş grubuna hitap eden, entegre bir ortez sistemidir.

ADM
ADM MODULAR BRACE SYSTEM

ADM™ Bilek-Ayak Ortezi (ADM AFO)

ADM AFO, gece uygulanan ortez sisteminin temel bileşenini oluşturur. İlk kez, ortez kullanan çarpık ayak hastalarının zorlu klinik gereksinimlerini karşılamak amacıyla modern ayakkabı üretim teknolojisi uygulanmıştır. Bunun sonucundaysa etkileyici ADM AFO elde edilmiştir; günümüzde mevcut en konforlu, sıkı oturan, hafif ve göze hitap eden çarpık ayak ortezi. ADM AFO'nun her detayı, klinik etkinlik ve zorunlu ortez protokollerinin toleransını desteklemek üzere tasarlanmıştır.



ADM AFO, katı bir çekirdeği çevreleyen yumuşak, ultra hafif ve konforlu EVA köpüğünden imal edilir. AFO, en yerleşik çarpık ayak sandalet tasarım prensiplerini modern spor ayakkabı üretim süreçleri ve materyalleri ile bir araya getirir. Bunun neticesinde, çarpık ayak nüskünün önlenmesi için gerekli tüm özelliklere sahip çok rahat, hafif ve cazip bir ortez elde edilir.



ADM AFO, gerek çift taraflı harici rotasyon çubukları gerek tek taraflı Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizmaları ile kullanılabilen tek sandalettir.



2021 yılının ilerleyen aylarında, AFO aynı zamanda Dobbs™ artikülasyonlu ve konvansiyonel ayak abdüksiyon çubuklarını da destekleyecektir.

Esnek materyallerden üretilen üç yönlü streç dil sistemi, sub-talar veya tibio-talar hareketleri olumsuz etkilemeden hastaların ayaklarını rahatça sabitler.





ADM™ Bilek-Ayak Ortezi göz alıcı, konforlu ve etkilidir. Hem çift taraflı Harici Rotasyon Çubukları hem de tek taraflı Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizmaları ile kullanılabilen tek ortezdir.

ADM AFO ayak astarı, klasik simetrik düz-kalıp sandaletlerle elde edilenden daha rahat ve güvenli oturma sağlamak üzere, gerçek düzeltilmiş sol ve sağ çarpık ayaklar göz önünde bulundurularak modellenmiştir. Astar ve iç yapı, çarpık ayak hastalarında ayak biçiminde iyileştirmeler yapılmasını kolaylaştırmak üzere düzleştirilmiş yanal kenarlık içerir ve kemer desteği içermez.

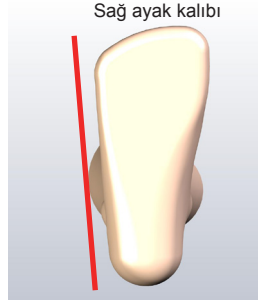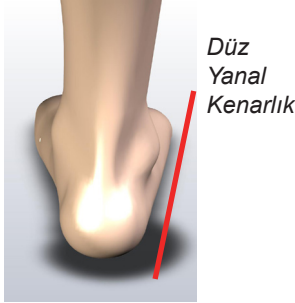

Modern ayakkabılar gibi, ADM AFO da hafiflik, yüksek dayanım ve konforu bir arada sunmak gibi erişilmesi zor bir hedefi elde etmek üzere laminasyon teknolojisi kullanılarak imal edilir. İç yapısında, bir çarpık ayak ortezinden istenen fiziksel ve düzeltici özellikleri karşılamak üzere bir fort içerir.

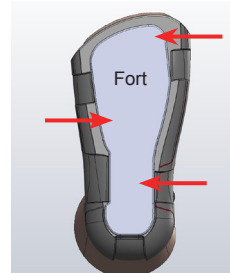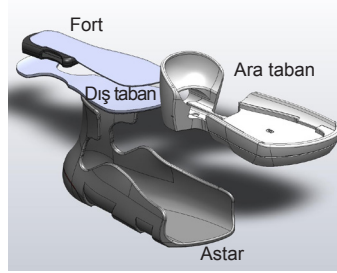

İç yapısal bileşenler ve şerit sistemi, yanal kenarlık düzleşmesini nazikçe desteklemek üzere geliştirilmiştir.



Topuk iyileşmesi, arka gösterge deliği ve derinlik mastarı kullanılarak doğru şekilde ölçülebilir.

ADM™ Bilek-Ayak Ortezi, çarpık ayak ortez tasarımıdaki uzmanlık ile modern büyük ölçekli ayakkabı üretim teknolojisinin bir birleşimini temsil eder.

ADM™ Harici Rotasyon Çubuğu

ADM Harici Rotasyon Çubuğu, çarpık ayak hastalarına yönelik Denis Browne çubuk tipi Ayak Abdüksiyon Ortezi için modern, hafif, şık ve kullanışlı bir uygulama alanı sunar.



Ebeveynlerin tek yapması gereken, çubuk konfigürasyonunu çocukları için reçete edildiği şekilde kullanmaktır. Yoğun klinikler, çubuk ayarlama konusunda ebeveynleri eğitmek zorunda kalmadıkları için zamandan tasarruf edecektir. Hatalı ortez ayarlamasından kaynaklanan komplikasyonların da önüne geçilir.



İki taraflı çarpık ayak olgularında 70 veya 60 derecelik klipslerin, tek taraflı olgularda ise etkilenecek taraf için 30 derecelik klipslerin tercih edilmesi uygundur. Atipik çarpık ayak olgularında ve/veya 60 ya da 70 derecelik harici rotasyonun tolere edilemediği durumlarda 45 derecelik klipsler kullanın. Hastanın omuz genişliğini ölçün ve temin edilen kitten gereken çubuğu seçin. Hasta büyüdüğünde, yalnızca sıradaki büyük beden için çubuğun değiştirilmesi yeterlidir.



ADM™ Harici Rotasyon Çubuğu şık görünümlü, hafif ve etkilidir. Ebeveynler ve bakıcılar için konfigürasyon veya ayarlama gerektirmeyen basit ve sıkıntısız bir çözüm getirir.



Ekstra Kısa (ve ultra hafif) Çubuklar, çok küçük hastalara uyacak şekilde tüm klips konfigürasyonlarında ve klinisyenlerin ayakları omuz genişliğinden daha kısa ayarlamak istediği durumlarda kullanıma uygundur.



Klips Seçme ve Yerleştirme

Çubuk birleştirme sadece birkaç saniye sürer. Çubuğu birleştirmek için hiçbir vida veya alet gerekmez. Sadece ihtiyacınız olan çubuk uzunluğunu seçin. Klipsi yerleştirin, çevirin ve yerine oturtun. Parçalarına ayırmak için ise bir Klips Çıkarma Aleti (her Çubuk setiyle birlikte temin edilir) kullanılması gerekir.

Çevirme ve Yerine Oturtma



Klips Çıkarma Aleti

Maliyet Limit Garantisi

Satın alınan her küçük veya büyük çubuk klips çiftiyle birlikte, hastanın ortez uygulama sürecine hizmet etmek için gereken çubuk boyları ücretsiz olarak sağlanır. Hasta, tedavi süresince yalnızca bir veya iki çift klipse ihtiyaç duyar. Klipsler ömür boyu garantilidir.

ADM™ Harici Rotasyon Çubuğu, yoğun kliniklerde bakılan hasta sayısını artırmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca gereken bileşenleri seçmeniz ve reçete edilen çubuk konfigürasyonunu ebeveynlere veya bakıcılara teslim etmeniz yeterlidir.




Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması (ADM™)

Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması, çarpık ayak hastaları için tek güvenilir tek taraflı ortez seçeneğini ve daha kompleks rahatsızlıkların pek çoğu için tek ortez seçeneğini sunmaktadır.




Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması bir ADM AFO'ya takıldığında, hastanın Sub-Talar (STJ) ve Tibio-Talar (TTJ) eklemleriyle anatomik olarak hizalanan iki döner mekanizmaya sahip bir cihazdır. ADM mekanizmaları gücünü hastanın ayağına abdüksiyon ve dorsifleksiyon uygulayan iki yaydan alır.

Yay tahrikli ADM mekanizmaları, hastanın sub-talar ve tibio-talar eklemlerini normal şekilde hareket etmesine olanak sağlar, ancak hasta uykudayken gevşediğinde ADM, ayağı bir abdüksiyon ve dorsifleksiyon pozisyonuna getirir. Uyku esnasında ADM düzeltilmiş ayak pozisyonunu muhafaza eder ve ayak ve alt bacağın tendon ve ligamentlerine uzun süreli, düşük yoğunlukta gerdirmeyi sürdürür.

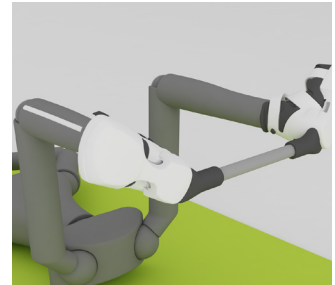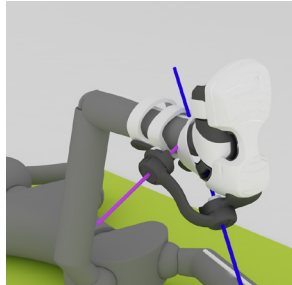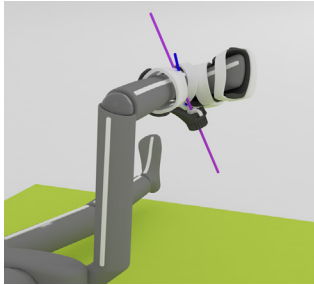

Gelişmiş dijital animasyonun kullanıldığı biyomekanik analizlerde, ADM ve Denis Browne ortezlerinin benzer ayak pozisyonları elde ettiği gösterilmiştir. İki cihaz çok farklı şekilde işlev gösterse de, nihayetinde benzer bir sonuca ulaşmaktadır. C-Pro Direct bir cihaz tipi karşısında diğerini savunmamakta, ancak ek ortez uygulama seçeneklerinin bulunabilirliğini hasta popülasyonları açısından önemli bir avantaj olarak görmektedir. Edindiğimiz deneyimler doğrultusunda, tek bir cihaz her zaman her hasta için en iyi seçenek değildir.

Daha komplike gereksinimleri olan birçok hasta için, ADM™ tek uygulanabilir ortez seçeneğini oluşturur. Edindiğimiz deneyimler doğrultusunda, tek bir cihaz her zaman her hasta için en iyi seçenek değildir.

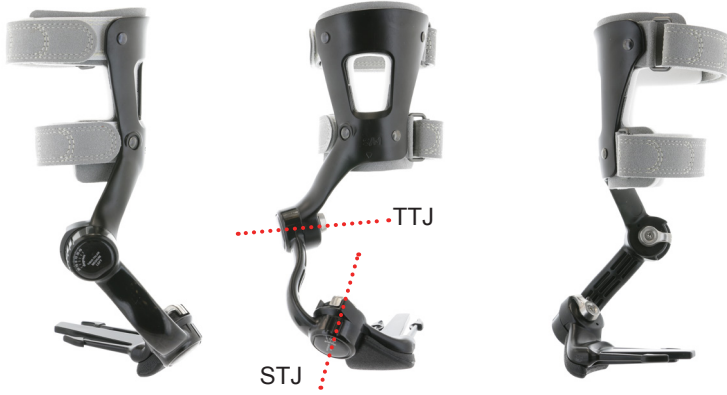

Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizmaları, ADM Yan Klips Sistemi aracılığıyla ayakkabılara takılır.

ADM'ler, bir gece ortezi olarak ADM Bilek-Ayak Ortezine takılabilir, ancak adapte ambulator ayakkabılara veya hatta kişiye özel AFO'lara da takılabilir.

ADM'ler genellikle komplike olmayan Çarpık Ayak hastaları için ilk ortez seçeneği olarak kullanılsa da, tercihen bu şekilde kullanılabilir. ADM'yi özellikle tek ortezleri olarak kullanmış olan pek çok hasta örneği mevcuttur ve bu hastalar şu anda çarpık ayak tedavilerini başarıyla tamamlamış durumdadırlar.

ADM'ler şu an itibarıyla en sık olarak Denis Browne tipi ortezi tolere etme sorunları ortaya çıktığında veya daha standart tedavinin başarısız olup alternatif bir koruyucu seçeneğin arandığı durumlarda kullanılmaktadır. Çok sık şekilde, bu durum hastanın çok hareketli olduğu, nüks yaşadığı, su toplaması ve yaraların görüldüğü veya diğer komplikasyonların var olduğu durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Sürekli ortez uygulanması gereken büyük yaştaki çocuklar çok sıklıkla ADM'yi Harici Rotasyon Çubuklarından daha kolay biçimde kabul eder.

*ADM Modular Bracing System ile sağlanan önemli bir avantaj tek bir ADM Bilek-Ayak Ortezinin **hem Harici Rotasyon Çubukları hem de ADM'ler** içermesidir. Bu sayede, gerektiğinde alternatif ortez seçeneklerinin araştırılması kolaylaşır.*

Ortak bir yan klips sisteminin paylaşılması yoluyla artık ADM'ler ve Harici Rotasyon Çubuklarının tek bir Bilek-Ayak Ortezi ile kullanılması mümkündür.

Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması (Ambulatuvar ADM™)

Adapte normal gündüz ayakkabısına takılan Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması, ambulasyon sırasında ayağa aynı anda abdüksiyon ve dorsifleksiyon uygulayan bir ambulatuvar AFO oluşturur. Düzeltmeden sonra bile rezidüel dinamik supinasyonu olan hastalar veya süregelen komplike gereksinimleri olan hastalar için, ambulatuvar ADM yüksek derecede etkili bir tedavi seçeneği olabilir.



Ayakkabı, ADM Soketlerini içerecek şekilde adapte edilir. Bu işlem ADM cihazlarının takılıp çıkarılabilmesini sağlar.

Ayakkabı adaptasyonu C-Pro Direct tarafından ya da diğer ortez ve protez klinikleri tarafından ADM Ayakkabı adaptasyon par Galorı kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ayakkabı adaptasyon par Galorı ayrıca çok özel hasta gereksinimleri söz konusu olduğunda ADM Soketlerinin kişiye özel imal edilmiş AFO'lara dâhil edilmesine de olanak sağlar.




ADM™ tasarımı, ortak bir yan klips sistemini paylaşacak şekilde değiştirilmiştir. Artık tüm ADM'ler hem gece cihazları hem de ambulatuvar cihazları olarak kullanılabilir.

Bir ambulatuar ortez olarak ADM hastanın yürüyüşünü değiştirir. Adım uzunluğu artırılır, topuk vuruşu iyileştirilir ve içeri dönüş azaltılır. Ambulatuar ADM kullanan hastalar sıklıkla diğer ortezlere kıyasla daha yüksek dayanım, mobilite ve rahatlık bildirmektedir.



1. İlk sallanma fazı:
Hasta, ADM olmadan
varusta yürüme
kanıtı gösterir.

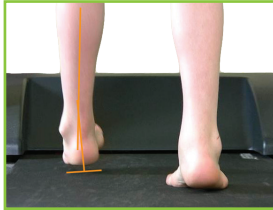

2. Orta sallanma fazı:
ADM topuk varusunu
düzeltmektedir ve artık
topuk vuruşu biraz
valgus içindedir.



3. Terminal sallanma
fazı: ADM daha aktif
topuk vuruşunu mümkün
kılar, daha az içeri doğru
rotasyon ve daha fazla
dorsifleksiyon vardır.



ADM olmadan (*Kırmızı çizgi*) ve
ADM ile (*Yeşil çizgi*) tipik hasta
Basınç Merkezi profili


Basınç Merkezi (COP): COP analizi, ADM'nin supinasyonlu yürüyüşü olan hastanın COP'sini, yanal kenarlık üzerindeki basıncı azaltacak şekilde nasıl değiştirdiğini göstermektedir.

Bir ambulatuar ortez sistemi olarak kullanıldığında ADM™ hemen anlamlı yürüyüş iyileştirmeleri sağlayarak hastalara daha yüksek mobilite dayanımı ve güven sunar.

Bilek-Ayak Ortezi

Çarpık Ayak Bilek-Ayak Ortezi hastanın ayağına sıkı oturmalıdır. Ayak parmağı şeridi parmakları kaplamalı ve parmaklar AFO astarının sonundan daha ileriye uzanmamalıdır. Aşağıdaki beden/numara kılavuzunda, büyümeye bir miktar pay verilmektedir. Gerekli numarayı seçmek için ayak uzunluğunu şemada gösterilen şekilde ölçün. Bu ölçüm işlemi, hastanın bir kâğıt üzerinde durması ve topuk ve parmaktan iki paralel çizgi çizilmesi yoluyla, özel ekipman olmadan gerçekleştirilebilir. Ardından milimetre (mm) cinsinden L uzunluğunu ölçmek için bir cetvel kullanın. Örneğin, 120 mm uzunluğunda bir ayak için normalde 4 AFO numarası gerekecektir. Bu da en az 7 mm büyümeye payına izin verir.


Ayak Uzunluğu L (mm)	Sandalet Numarası
67 ila 70	0000
71 ila 75	000
76 ila 80	00
81 ila 87	0
88 ila 92	1
93 ila 102	2
103 ila 112	3
113 ila 122	4
123 ila 132	5
133 ila 142	6
143 ila 152	7
153 ila 162	8
163 ila 172	9
173 ila 182	10
183 ila 192	11
193 ila 202	12

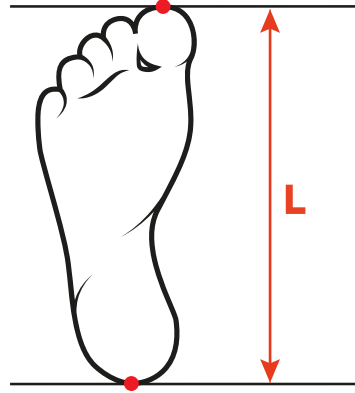

Aşağıdaki beden/numara tablosunda büyümeye bir miktar pay verilmektedir. Çocuğa çok büyük gelen AFO'ların kullanılmaması önemlidir, çünkü Harici Rotasyon Çubukları ya da ADM'lerin tedavi işlevi olumsuz etkilenebilir.

ADM Modular Bracing System™ Çubuk Seçimi

Harici Rotasyon Çubukları genellikle AFO'nun topukları açılmış halde omuz genişliğinde ayarlanır. Bununla birlikte, hasta endikasyonlarına bağlı olarak klinisyenlerin daha kısa veya daha uzun çubuk genişlikleri reçete edebileceği kabul edilir.

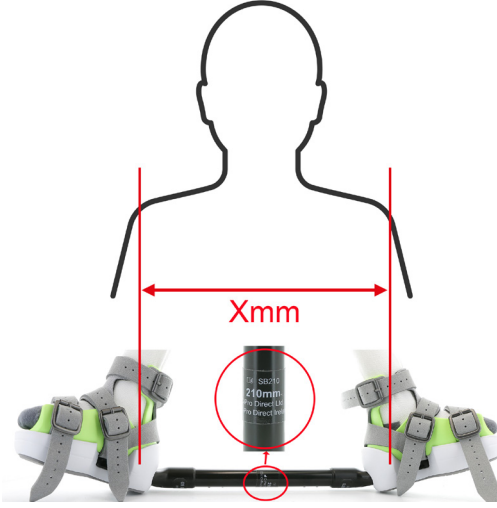

NOTLAR:

Hastanın omuz genişliğine (**X mm**) veya gereken ortezin topukları arasındaki mesafeye en yakın çubuk uzunluğunu seçin.

Çubuklar 130 mm ile 350 mm arasında 20 mm artışlarla temin edilebilir.

Ekstra Kısa Çubuklar, kalıcı olarak takılmış klips uçlarıyla temin edilir. Bu nedenle, her Ekstra Kısa Çubuk siparişinde klips aç gereksinimleri belirtilmelidir; örneğin, 130 mm Sol 30 derece Sağ 60 derece.

Sipariş Edilebilir Çubuk Tipi	Topuklar Arası Genişlik (mm)	Ayakkobi Uyumluluğu
Ekstra Kısa Çubuk	130 ila 150	0000 ila 5
Küçük Çubuk Seti 1	170 ila 250 (5 çubuk)	0000 ila 5
Küçük Çubuk Seti 2	270 ila 290 (2 çubuk)	0000 ila 5
Büyük Çubuk Seti 1	250 ila 310 (4 çubuk)	6 ila 12
Büyük Çubuk Seti 2	330 ila 350 (2 çubuk)	6 ila 12
Tekli Çubuklar	Tüm boyutlar (1 çubuk)	0000 ila 12

Küçük ve Büyük Çubuk Seti 1s (kalın metinle) tedavi süresi boyunca çoğu hastanın gereksinimlerini destekler.

Sıfır Maliyetli Çubuklar

Satın alınan her küçük veya büyük çubuk klips çiftiyle, hastanın ortez uygulama sürecine hizmet etmek için gereken çubuk boyları ücretsiz olarak sağlanır.

Hasta, tedavi süresince yalnızca bir veya iki çift klipse ihtiyaç duyar.

Klipsler ömür boyu garantilidir.

Çubuk setleri, satın alınan her klips çiftiyle ücretsizdir. 10 veya 25 hastayı destekleyen paketler için çubuk klipslerinde indirimler vardır.

ADM Modular Bracing System™ Klipsleri

ADM Modüler Ortez Çubuk Klipslerinin açısı sabittir. İki boyutta, Sol ve Sağ olarak ve dört abdüksiyon açısıyla (70, 60, 45 ve 30 derece) temin edilir.

Örneğin, Sol taraf tek taraflı çarpık ayak hastasına (2 numara AFO) ait sipariş için, Küçük Sol 60 ve Küçük Sağ 30 klips gerekir.

Klips Boyut Aralığı	Harici Rotasyon Açısı (drc)	Tipik Uygulama
Küçük	70	Çarpık ayak
Küçük	60	Çarpık ayak
Küçük	45	Komplike çarpık ayak
Küçük	30	Çarpık ayak dışı
Büyük	70	Çarpık ayak
Büyük	60	Çarpık ayak
Büyük	45	Komplike çarpık ayak
Büyük	30	Çarpık ayak dışı

Küçük Klips boyut aralığı 0000 ila 5 numara AFO'lar içindir.

Büyük Klips boyut aralığı 6 ila 12 numara AFO'lar içindir.

Ömür Boyu Garanti

Çubuk klipsleri ömür boyu garantilidir. Tek bir çocuk için harcanan azami tutar, tüm ortez uygulama süreci boyunca 1 ya da 2 çift klips olacaktır.

Bu görsel, tipik olarak iki taraflı bir çarpık ayak hastasında kullanılacak Sol 60 derece ve Sağ 60 derece çubuk konfigürasyonuna aittir.




Çok sayıda hastanın tedavi edildiği yoğun klinikler çeşitli boyutlarda klips ve çubuk setini stokta bulundurmaya tercih edebilir. 10'lu ve 25'li paketler için indirimler uygulanır ve bu, tedavi maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Abduction Dorsiflexion Mechanism™

ADM'ler XXXS ile L arasında sekiz boyutta temin edilir. Uzunluğu 202 mm'nin üzerindeki küçük yetişkin ayakları için talep üzerine ek bir Ekstra Büyük (XL) boyut da sunulabilir. ADM Boyut/Numara seçimi aşağıdaki tablo kullanılarak ayak uzunluğuna göre yapılır. Siparişler verilirken, gereken ADM yay konfigürasyonu da belirtilmelidir. Ayakları yeterince düzeltilmiş çoğu çarpık ayak hastası **Standart STJ** (Sub-Talar Eklem) ve **Standart TTJ** (Tibio-Talar Eklem) yayları ile uyku sırasında tolere edilebilen bir gerdirme derecesi ve iyi bir pozisyon elde edecektir. Bununla birlikte, bu yaylar için Daha Dayanıklı ve Daha Yumuşak seçenekler de mevcuttur. ADM boyutları veya yay seçimi konusunda yardım, öneri ve rehberlik için lütfen clinicalsupport@c-prodirect.com adresinden e-posta yoluyla C-Pro Direct ile iletişim kurun.

L Ayak Uzunluğu Aralığı (mm)	ADM Boyutu	AFO Boyutu	H2 Maks Yükseklik (mm)	H1 Min Yükseklik (mm)
81 ila 92	XXXS	0 ila 1	115	65
93 ila 102	XXS	2	136	76
103 ila 122	XS	3 ila 4	156	76
123 ila 132	S	5	185	76
133 ila 142	SM	6	188	84
143 ila 162	M	7 ila 8	210	90
163 ila 182	ML	9 ila 10	223	103
183 ila 202	L	11 ila 12	250	103
203 ila 272	XL	geçerli değil	270	115
203 ila 272	XL	geçerli değil	330	115

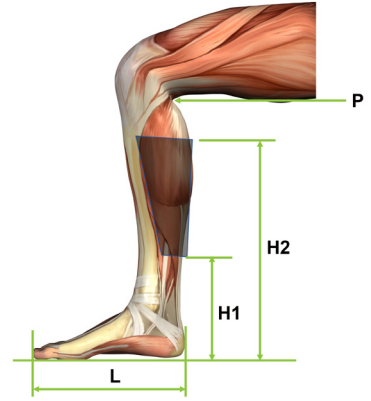

Takıldığında, ADM'nin üst kısmı rahatsızlığa neden olacağından hastanın Popliteal kat yerine (P) yakın uzanmamalıdır.

XL boyutlar gerekirse lütfen C-Pro Direct ile iletişim kurun. Optimum konfigürasyon sağlamak için ek ayrıntılar gerekebilir. X-L ADM'ler standart yükseklikte (H2 = 270) ve uzun (H2 = 330) olarak temin edilir. Ayrıca standart ve daha geniş baldır çevreleri için de mevcuttur.

C-Pro Direct her zaman ADM™ boyutları ve yay seçimi hakkında önerilerde bulunmaya hazırdır. Daha fazla yardıma www.c-prodirect.com adresinden ulaşılabilir

Tüm sorularınız için adm@c-prodirect.com adresinden bize ulaşın

ŞİMDİ DENEYİN

Dünyanın en gelişmiş Çarpık ayak ortez sistemini denemek için bize ulaşın

Distribütör soruları kabul edilir



www.c-prodirect.com

0044 (0) 1732 860 158

adm@c-prodirect.com

ADM Modular Clubfoot Brace System™ ürünleri, ISO 13485 sertifikalı bir şirket olan C-Pro Direct Ltd tarafından üretilir ve Sınıf 1 Tıbbi Cihazlara ilişkin Birleşik Krallık, Avrupa (MDR) ve ABD yönetmeliklerine uyacak şekilde etiketlenir ve paketlenir. Tüm ürünler bir dizi uluslararası patent ve patent başvurusu ile korunmaktadır ve tüm hakları saklıdır. ADM Modular Brace System™, ADM™ ve ADM Ponseti™, C-Pro Direct Ltd. Şirketinin Ticari Markalarıdır.

C-Pro Direct Ltd. 7a Enterprise Way, Edenbridge, Kent, Birleşik Krallık. TN8 6HF



DNKFC102160